

5-Quart Sharps Recovery System™

This Sharps Compliance, Inc. 5-Quart Sharps Recovery System (System) contains everything required to safely package your needles, syringes, lancets and other biohazardous materials to be mailed for proper treatment.

Go to www.sharpsinc.com for more information.



5-Quart Sharps Recovery System

CONTENTS

- Outer shipping box with pre-attached USPS Merchandise Return Label (return postage is prepaid)
- Inner box
- Welcome bag with 4 mil plastic bag liner, container instructions (R98334H), System instructions, twist-tie and tape
- One 5-qt SharpsStar™ sharps container with absorbent pad
- Tracking Document on outside of shipping box

PRECAUTIONS – READ PRIOR TO PROCEEDING

- DO NOT place mercury or lead-containing devices or batteries into this container.
- DO NOT place drugs or chemotherapeutic agents into this container unless program previously established. Contact Sharps at 800-772-5657 for the appropriate System or labeling method to assure proper treatment.
- Never try to retrieve anything from sharps collection container.
- Always keep container secured from unauthorized persons.
- Follow proper container use and packaging instructions.
- All persons preparing this System for shipment must follow proper packaging instructions included in this document. Contact Sharps at 800.772.5657 with questions.
- Comply with applicable laws and regulations regarding filling, handling, transport, and tracking of this product. New Jersey regulated generators attach NJ Tracking Form to Sharps tracking form before placing into the plastic pouch for mailing.
- DO NOT overfill.
- Container is puncture-resistant, not puncture-proof. Carry full container by top.
- Empty all products free of liquids as much as possible.
- DO NOT remove absorbent pad from container.
- DO NOT mail container in any box other than the one supplied with this system.
- Adhere to the maximum return weight for this system.

FOR ASSISTANCE OR TO ORDER REPLACEMENT COMPONENTS, CALL 800.772.5657

TRAINING & INSTRUCTIONS FOR YOUR SHARPS RECOVERY SYSTEM

Order your new 5-Quart Sharps Recovery System before this system is full.

1. Remove container from packaging and assemble according to instructions included with container (R98334H).
2. Secure container in wall enclosure (see mounting instructions R98346F included with wall enclosure). Save all components for repackaging System for mailing.
3. Place sharps or biohazardous materials into container (Fig. 1).
4. Secure lid according to instructions (R98334H) (Fig. 2).
5. When ready for mailing, place closed container into the plastic bag and box. Securely seal bag around container using twist-tie.
6. Close the box flaps and tape.
7. Remove the tracking form from the plastic pouch located on the outside of the shipping box. Make sure the top portion of the form is completed and sign. Remove the bottom copy of the form and retain it for your records. Return the remaining copies of the form into the plastic pouch with the barcode facing out.
8. For tracking purposes, log on to your SharpsTracer® account at www.sharpstracer.com and enter the box number. To sign up for this free service, call 800.772.5657.
9. Take the properly sealed package to any U.S. Post Office, give to your mail carrier, or arrange a priority pickup from your post office at www.sharpsinc.com. ONLY SHIP THROUGH USPS. Postage will be paid by Sharps Compliance.
10. Upon arrival and processing at the Sharps Compliance treatment facility, the system will be treated in compliance with all state and federal regulations.
11. Download your Proof of Recovery from your SharpsTracer® account at www.sharpstracer.com in 30-45 days.

IN CASE OF EMERGENCY OR DISCOVERY OF DAMAGE OR LEAKAGE, CALL 1.800.772.5657

For more information regarding the intended use of the 5-Quart SharpStar container, call 800.772.5657.



Figure 1

Place sharps into container.



Figure 2

Close according to instructions (R98334H)

Sistema™ de Recuperación de objetos punzantes de 5 cuartos de galón

Este Sistema de Recuperación de 5 cuartos de galón de Sharps Compliance, Inc. (el Sistema) contiene todo lo requerido para embalar en forma segura sus agujas, jeringas, lancetas y otros materiales de riesgo biológico, con el objeto de enviarlos para su tratamiento adecuado.

Para obtener más información, vaya a www.sharpsinc.com.



Sistema de Recuperación de 5 cuartos de galón

CONTENIDO

- Caja externa de envío con etiqueta prefijada de USPS de devolución de mercancía (con flete de devolución prepago)
- Caja interior
- Bolsa útil con forro de plástico de 4 mil. de grosor, instrucciones para el envase (R98334H), instrucciones del Sistema, tirilla de amarre y cinta adhesiva
- Un envase de 5 cuartos de galón SharpsStar™ con almohadilla absorbente
- Documento de seguimiento en la parte exterior de la caja de embalaje.

PRECAUCIONES – LEA ANTES DE PROCEDER

- NO coloque dispositivos o baterías que contienen mercurio o plomo en este envase.
- NO coloque drogas o agentes quimioterapéuticos en este envase a menos que el programa lo haya establecido de antemano. Contacte a Sharps al 800-772-5657 para informarse sobre el Sistema o el método de etiquetado apropiado para asegurar un tratamiento adecuado.
- Nunca intente extraer algo del envase de recolección de objetos punzantes.
- Mantenga siempre el envase fuera del alcance de las personas no autorizadas.
- Siga las instrucciones apropiadas de uso y embalaje del envase.
- Todas las personas que preparan este Sistema para su envío deberán seguir las instrucciones apropiadas de embalaje que se incluyen en este documento. Si tiene alguna pregunta, contacte a Sharps al 800.772.5657.
- Cumpla con las leyes y reglamentos aplicables referentes al llenado, manejo, transporte y seguimiento de este producto. Los generadores de envío sujetos a reglamentaciones de New Jersey deberán adjuntar el formulario de seguimiento de NJ al formulario de seguimiento de Sharps antes de colocarlo en la bolsa de plástico para su envío.
- NO sobrellene el envase.
- El envase es resistente a los pinchazos pero no a prueba de pinchazos. Transporte el envase lleno sujetándolo por la parte superior.
- Vacíe lo más posible los envases de líquidos.
- NO retire la almohadilla absorbente del envase.
- NO envíe por correo el envase en una caja que no sea la que se suministra con este sistema.
- Cumpla con el peso máximo de devolución establecido para este sistema.

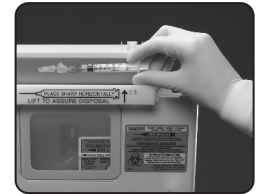


Figura 1
Coloque los objetos punzantes y/o afilados en el envase.



Figura 2
Círrrelo conforme a las instrucciones (R98334H).

SI NECESITA ASISTENCIA O DESEA ORDENAR COMPONENTES DE REEMPLAZO, LLAME AL 800.772.5657

CAPACITACIÓN Y INSTRUCCIONES PARA SU SISTEMA DE RECUPERACIÓN SHARPS™

Pida su nuevo Sistema de Recuperación de 5 cuartos de galón antes que se llene este envase.

1. Retire el envase del embalaje y ensámblelo conforme a las instrucciones incluidas con el envase (R98334H).
2. Coloque el envase dentro de la caja de protección (vea las instrucciones de montaje R98346F incluidas con la caja de protección). Guarde bien todos los componentes para reembalar el Sistema y enviarlo por correo.
3. Coloque los materiales usados de cuidado de salud en el envase (Fig. 1).
4. Cierre bien la tapa conforme a las instrucciones (R98334H) (Fig. 2).
5. Una vez que está listo para enviarlo por correo, coloque el envase cerrado en la bolsa de plástico y en la caja. Selle bien la bolsa alrededor del envase usando la tirilla de amarre.
6. Cierre las solapas de la caja de embalaje y asegúrelas con cinta adhesiva.
7. Retire el formulario de seguimiento de la bolsita de plástico que se encuentra en la parte exterior de la caja de embalaje. Asegúrese de que la sección superior del formulario está llenada y firmada. Retire la copia inferior del formulario y guárdela para sus registros. Vuelva a colocar las copias restantes del formulario en la bolsita de plástico, con el código de barras hacia fuera.
8. Si desea seguir el envío en línea, entre a su cuenta SharpsTracer® yendo a www.sharpstracer.com y ingrese el número de la caja. Para suscribirse a este servicio gratuito llame al 800.772.5657.
9. Lleve el embalaje bien sellado a cualquier oficina de correos de EE.UU., entréguesela a su cartero o solicite una recogida en prioridad de su oficina de correos yendo a www.sharpsinc.com. **HAGA EL ENVÍO SÓLO POR CORREO EEUU.** El flete será pagado por Sharps Compliance.
10. Una vez que el sistema llega y se lo procesa en la instalación de tratamiento de Sharps Compliance, se lo tratará conforme a todas las reglamentaciones estatales y federales.
11. Descargue su Prueba de Recuperación (Proof of Recovery) de su cuenta SharpsTracer® yendo a www.sharpstracer.com dentro de 30 a 45 días.

EN CASO DE EMERGENCIA O DE DESCUBRIMIENTO DE DAÑOS O FUGAS, LLAME AL 1.800.772.5657

Para recibir más información referente al uso al que está destinado el envase SharpStar de 5 cuartos de galón, llame al 800.772.5657.