

## 1-Qt., 1.5-Qt., 1, 2 & 3-Gallon Sharps Recovery System™

### SYSTEM COMPONENTS (Save for packaging and return mailing.)


- Prepaid return shipping box with pre-attached USPS mailing label (return postage is prepaid)
- Inner box and 4 mil plastic bag liner
- Red sharps collection containers with absorbent pad inside
- Tape, twist-tie
- Tracking document on outside of shipping box
- Instructions




### INSTRUCTIONS (Read instructions including all warnings completely before using this system.)



**Fig. 1:** Remove container from packaging and place at point of use. **DO NOT REMOVE ABSORBENT PAD.**

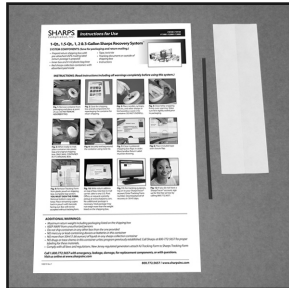

**Fig. 2:** Save the shipping box and all components for repackaging the container for return shipping.

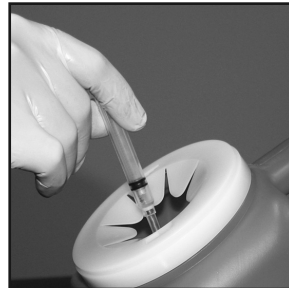


**Fig. 3:** Place needles, syringes, lancets, and other sharps or biohazardous waste into container. **DO NOT OVERFILL.**




**Fig. 4:** Close lid by snapping firmly over opening. Make sure lid is tightly sealed prior to packaging.



**Fig. 5:** When ready to mail, place container into plastic bag and original shipping box. **ONLY MAIL CONTAINER IN ITS ORIGINAL BOX.**

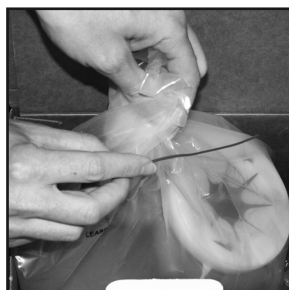

**Fig. 6:** Securely seal bag around the container using twist-tie.

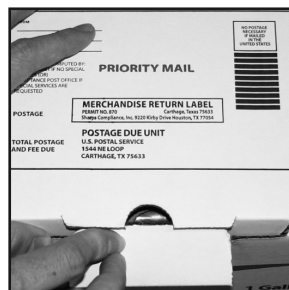


**Fig. 7:** Close numbered shipping box flaps in order. Merchandise Return Label must be showing.



**Fig. 8:** Place included tape over closure flap.




**Fig. 9:** Remove Tracking Form from plastic pouch on shipping box. Complete top section. **YOU MUST SIGN THE FORM.** Remove bottom copy and keep. Place remaining copies back in pouch with barcode facing out. Box will not be accepted without tracking form.

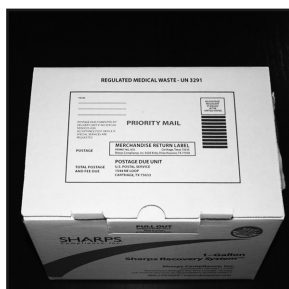

**Fig. 10:** Write return address on top of box. Give box to mail carrier, take to any U.S. Post Office, or request a priority pickup at [www.sharpsinc.com](http://www.sharpsinc.com). No additional postage is necessary. Total package may not weigh more than the weight listed on the shipping box.



**Fig. 11:** For tracking purposes, log on to your SharpsTracer® account. Enter Tracking Form number. Download proof of recovery in 30-45 days.

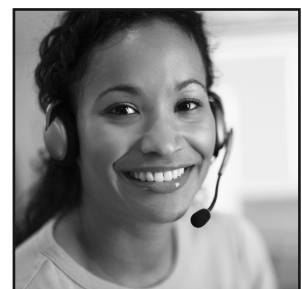

**Fig. 12:** If you do not have a SharpsTracer® account, sign up for this free service by calling 800.772.5657.

### ADDITIONAL WARNINGS:

- Maximum return weight including packaging listed on the shipping box
- **KEEP AWAY** from unauthorized persons
- Do not ship containers in any other box than the one provided
- **NO** mercury or lead-containing devices or batteries in this container
- **NO** more than 50ml (1.66 ounces) of liquids in any sharps collection container
- **NO** drugs or trace chemo in this container unless program previously established. Call Sharps at 800-772-5657 for proper labeling for these materials.
- Comply with all laws and regulations. New Jersey regulated generators attach NJ Tracking Form to Sharps Tracking Form

**Call 1.800.772.5657 with emergency, leakage, damage, for replacement components, or with questions. Visit us online at [www.sharpsinc.com](http://www.sharpsinc.com)**

## Sistemas de Recuperación de Instrumentos Punzantes™ de 1- 1.5 Cuartos de Galón, 1, 2 & 3 Galones

### COMPONENTES DEL SISTEMA (Guárdelos para empaquetar y devolver por correo).


- Caja de empaque con franqueo pre pagado con etiqueta de envío por USPS ya adosada (el franqueo para devolución está pre pagado)
- Caja interna y revestimiento de bolsa plástica de 4 mil
- Recipientes rojos recolectores de instrumentos punzantes con almohadilla absorbente en el interior
- Cinta adhesiva, amarre de torsión
- Documento de Seguimiento en el exterior de la caja de envío
- Instrucciones




### INSTRUCCIONES (Lea las instrucciones y las advertencias cuidadosamente antes de usar este sistema.)




**Fig. 1:** Retire el recipiente del empaque y póngalo en el PUNTO DE USO. NO RETIRE LA ALMOHADILLA ABSORBENTE.

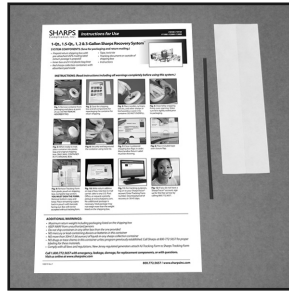

**Fig. 2:** Guarde la caja de envío y todos los componentes para re empaquetar el recipiente y devolverlo por correo.

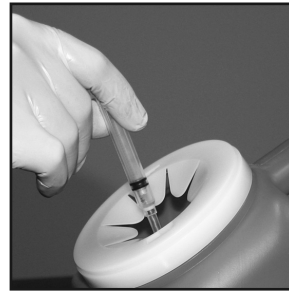


**Fig. 3:** Ponga agujas, jeringas, lancetas y otros objetos punzantes o desecho biológicamente peligroso en el recipiente. NO LO SOBRELLENE.

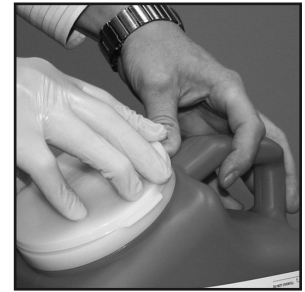


**Fig. 4:** Cierre la tapa presionándola firmemente sobre la apertura. Asegúrese de que la tapa esté firmemente sellada antes de empaquetar el recipiente.



**Fig. 5:** Cuando esté listo para enviarlo, ponga el recipiente en la bolsa plástica y luego en la caja de envío original. SOLO ENVÍE EL RECIPIENTE EN SU CAJA ORIGINAL.

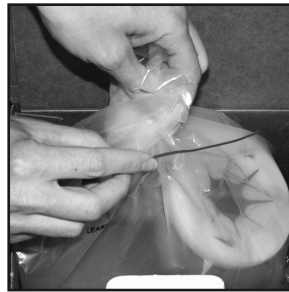

**Fig. 6:** Selle firmemente la bolsa alrededor del recipiente utilizando el amarre de torsión.

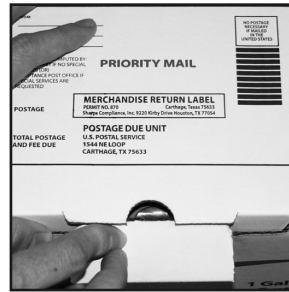


**Fig. 7:** Cierre las aletas numeradas de la caja en el orden correcto. La Etiqueta de Devolución de Mercancía debe verse.



**Fig. 8:** Ponga la cinta adhesiva incluida sobre la aleta de cierre.




**Fig. 9:** Retire el Formulario de Seguimiento de la bolsa plástica que está en la caja de envío. Complete la sección superior. DEBE FIRMAR EL FORMULARIO. Retire la última copia y guárdela. Ponga las copias restantes de vuelta en la bolsa con el código de barras hacia arriba. La caja no será aceptada sin el Formulario de seguimiento.

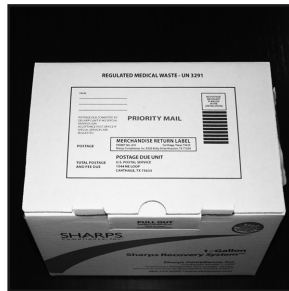

**Fig. 10:** Escriba la dirección de retorno en la parte superior de la caja. Entregue la caja al cartero, llévela a cualquier Oficina Postal U.S., o solicite una recogida con prioridad en [www.sharpsinc.com](http://www.sharpsinc.com). No se requiere de franqueo adicional. El paquete total no debe exceder el peso escrito en la caja de envío.



**Fig. 11:** Para propósitos de seguimiento, ingrese a su cuenta SharpsTracer®. Entre el número del Formulario de Seguimiento. Retire su recibo de recuperación dentro de 30-45 días.

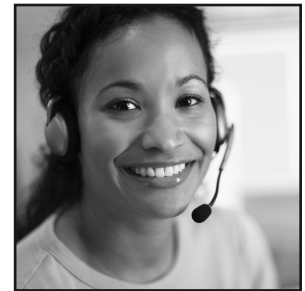

**Fig. 12:** Si no tiene una cuenta de SharpsTracer®, regístrese para recibir este servicio gratuito llamando al 800.772.5657.

### ADVERTENCIAS ADICIONALES:

- El peso máximo de retorno, incluyendo el empaque, se encuentra en la caja de envío
- MANTÉNGALO ALEJADO de personas no autorizadas
- No envíe recipientes en ninguna otra caja que no sea la original
- NO ponga dispositivos o baterías que contengan mercurio o plomo en este recipiente
- NO ponga más de 50ml (1.66 onzas) de líquidos en un recipiente de recolección de objetos punzantes
- NO ponga drogas ni químicos trazables en este recipiente, a menos que se haya establecido previamente un programa. Llame a Sharps a 800-772-5657 para obtener la información de etiquetado adecuada para estos materiales
- Cumpla con todas las leyes y regulaciones. Generadores regulados de New Jersey deben adjuntar un Formulario de Seguimiento de NJ al Formulario de Seguimiento de Sharps

**Llame al 1.800.772.5657 en casos de emergencia, fugas o daños, componentes de reemplazo, o si tiene alguna pregunta. Visítenos en línea en el sitio [www.sharpsinc.com](http://www.sharpsinc.com)**